


Vision A1 | Vision Slide

Автоматическая сканирующая система
для гистологии

Автоматическое сканирование и создание цифрового препарата
Для научно-исследовательских, гистологических и клинических
лабораторий

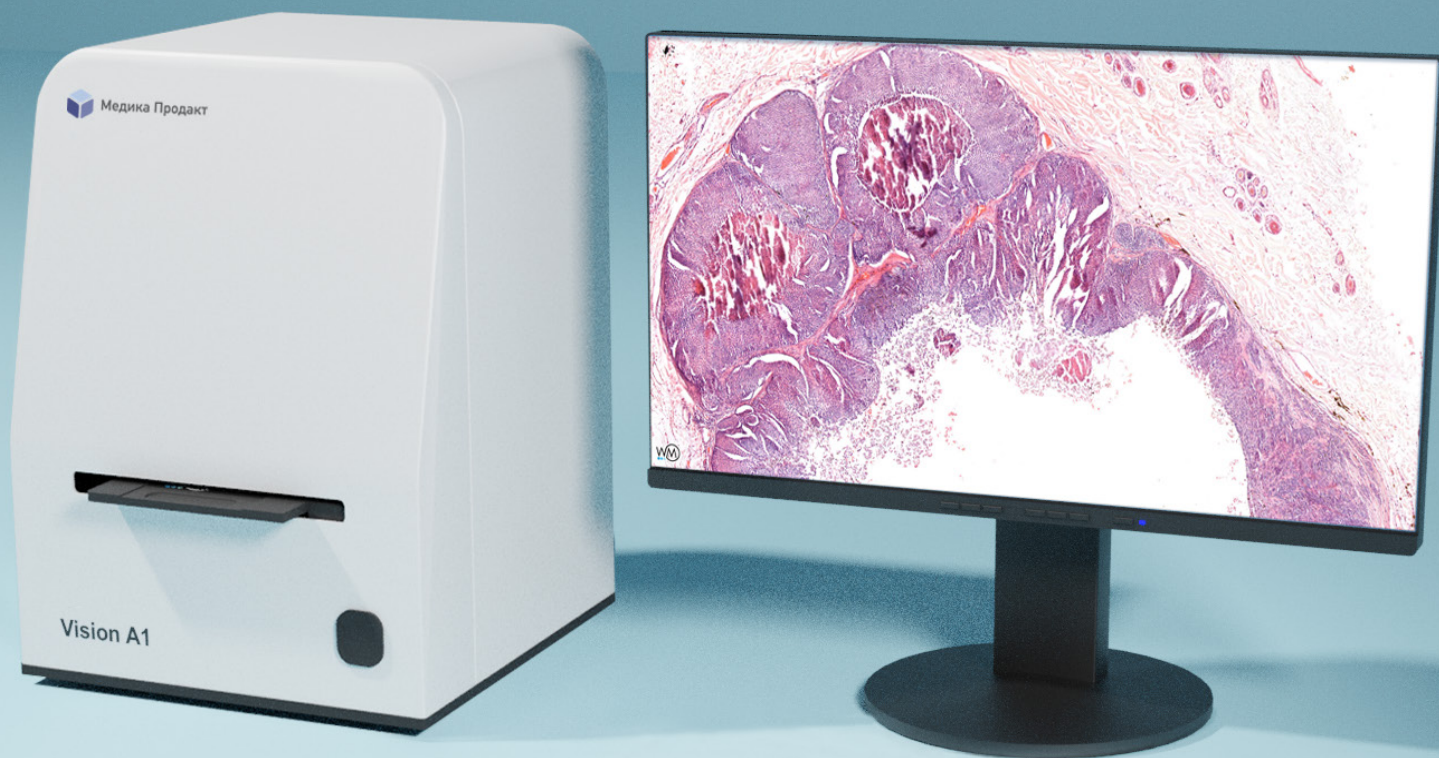

Медика Продакт

Передовые технологии для современной лаборатории



Инновации — ключ к улучшению качества жизни каждого человека

Медика Продакт — российский производитель и дистрибьютор медицинского оборудования и программного обеспечения. Последнее десятилетие компания развивает собственные уникальные продукты цифровой микроскопии для клинической лаборатории и научных исследований.


Программные продукты Vision обеспечивают передовые возможности в области обработки и визуализации микроскопических изображений, архивации данных и обмена информацией между специалистами. Наше оборудование обеспечивает точные результаты ранней диагностики и помогает предупредить заболевания на начальных этапах.

Патенты и свидетельства

- ✓ **5 патентов** Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
- ✓ **20 свидетельств ПО** Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
- ✓ **5 приложений** в реестре ПО Минцифры России

Vision A1

Цифровой слайд-сканер

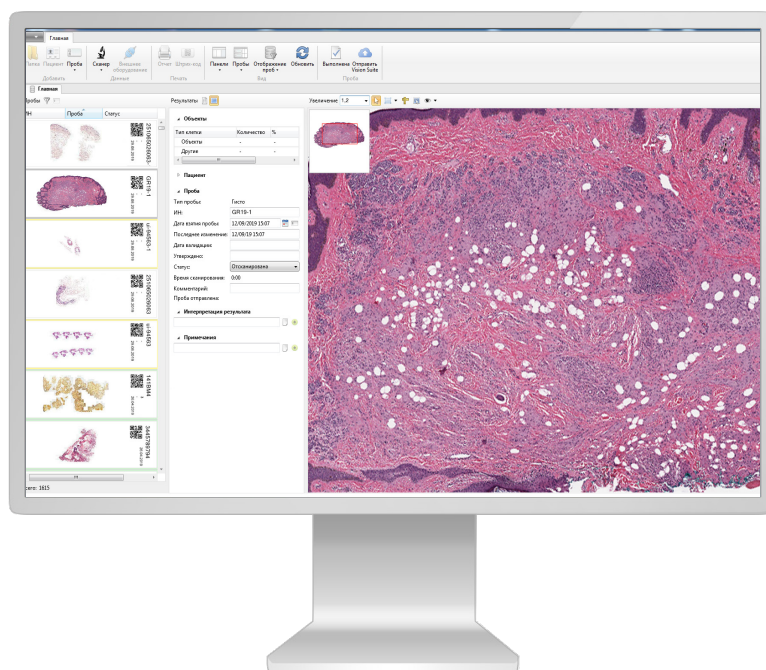

- Автоматическое сканирование образцов
- Автоматизация микроскопии в лаборатории

- Удобство и простота использования
- Для небольших и средних лабораторий


Сканирование в 3 простых действия



Поместите слайд в держатель




Установите держатель в сканер
и запустите сканирование слайдов

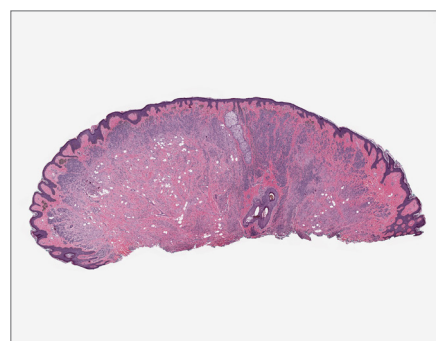

Получите результат


Vision Slide

Научные, гистологические и клинические исследования

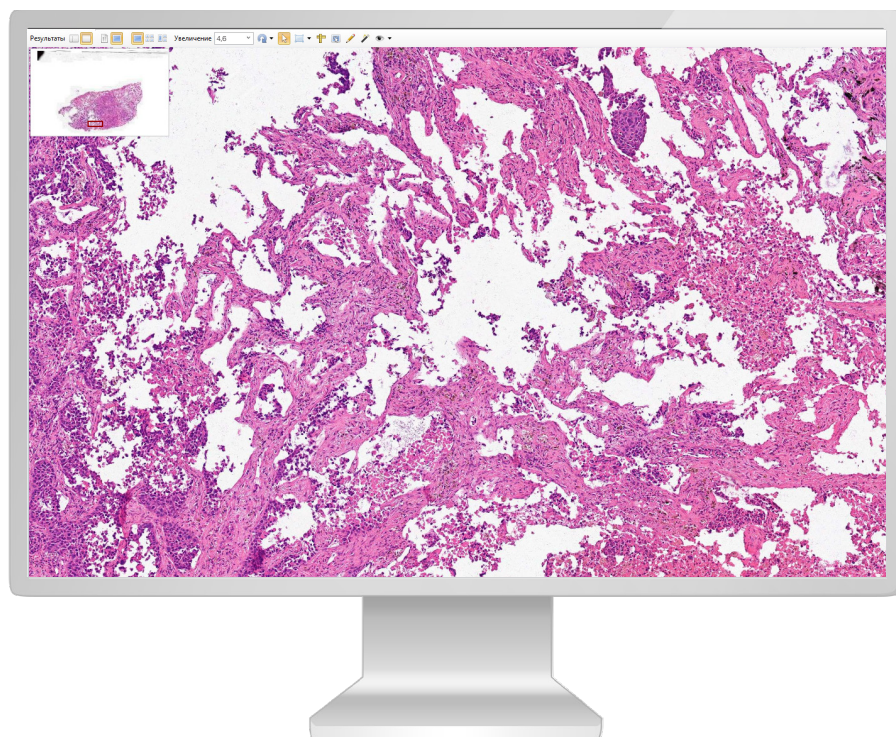

Удобная работа с цифровыми препаратами

Все пространство отдано для просмотра цифрового препарата

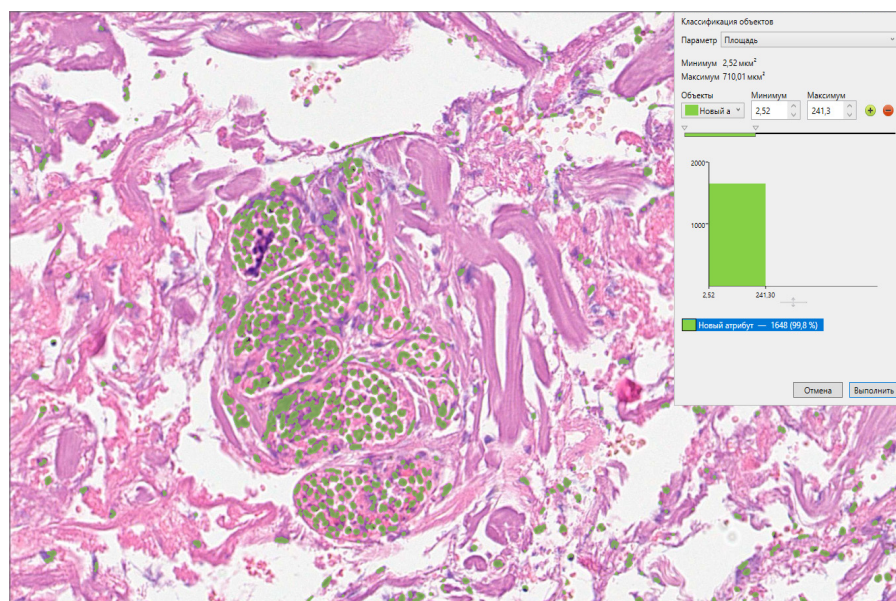

Анализ объектов.

Классификация и подсчет


Классификация объектов анализа по необходимым критериям. Автоматическая или ручная идентификация объектов на изображении. Измерение линейных и оптических параметров

Дополнительные инструменты для просмотра препаратов




Лупа

Увеличение изображения препарата

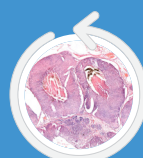


Поворот

Вращение цифрового препарата на 360°

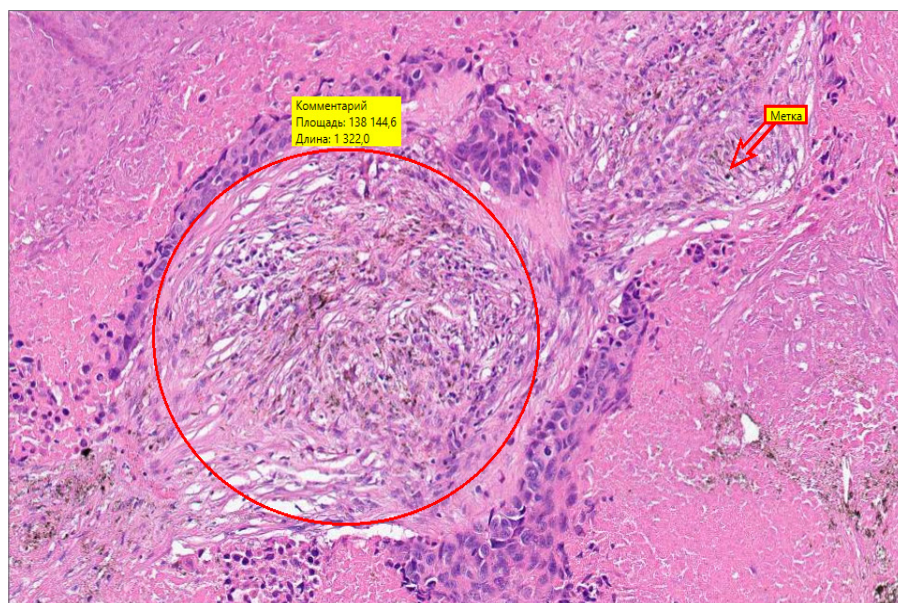

Комментарии и метки

Оставляйте комментарии и метки к изображению цифрового препарата

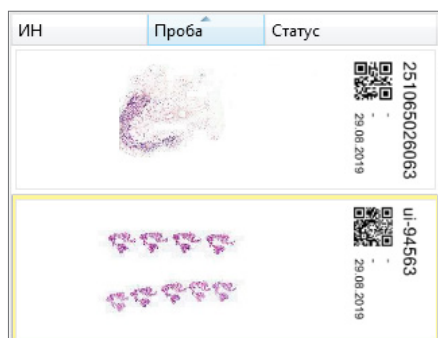

База данных для хранения цифровых препаратов

Проба

Тип пробы: Гисто

ИН: 32

Дата взятия пробы: 14.05.2018 11:59

Последнее изменение: 07.03.2023 13:24

Дата валидации: 25.09.2018 12:24

Утверждено: Нема-РС\Нема

Ответственные: [User Icon]


Статус: Выполнена

Время сканирования: 01:11

Настраиваемый электронный бланк




Подготовка отчетных документов

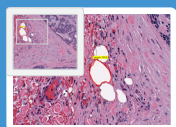

Трассировка

Отслеживание частей и масштаба изображения в области просмотра

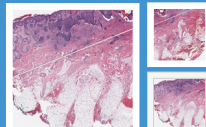

Мультипросмотр

Возможность одновременного просмотра нескольких препаратов

Pathoview

Личное облачное хранилище цифровых препаратов

www.pathoview.ru



Загрузка

Загружайте свои препараты любым удобным для вас способом: через браузер, из приложений Vision и Vision Slide Viewer или отправляйте из организации Vision Suite.



Хранение

Сохраняйте цифровые препараты в Pathoview, и они всегда будут у вас под рукой, где бы вы ни находились. Обеспечьте доступ к цифровым препаратам с любого устройства.



Общий доступ


Обмен информацией — делитесь своими препаратами и консультируйтесь с коллегами. Быстро и удобно отправляйте ссылки на препараты любого размера.




Цифровые препараты

Поддержка основных форматов цифровых препаратов: .mrxs, .svs, .tiff, .ndpi, .dcm.


Больше возможностей для работы с цифровыми препаратами

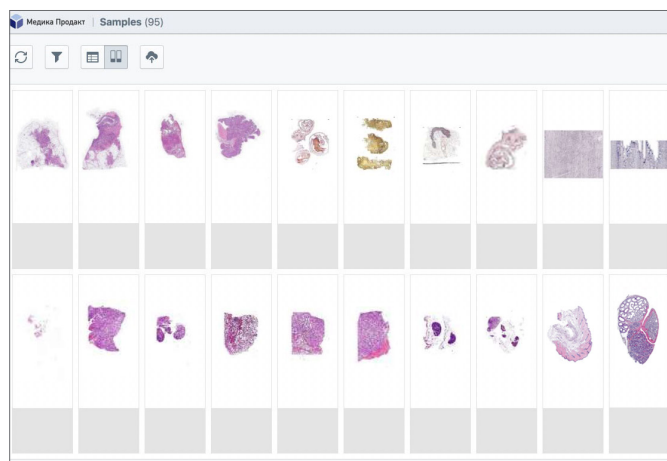


Просмотр препаратов в виде стекол

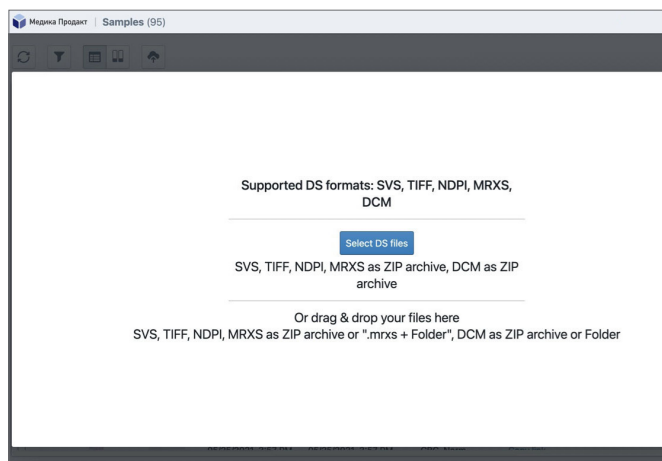

Загрузка препаратов через браузер

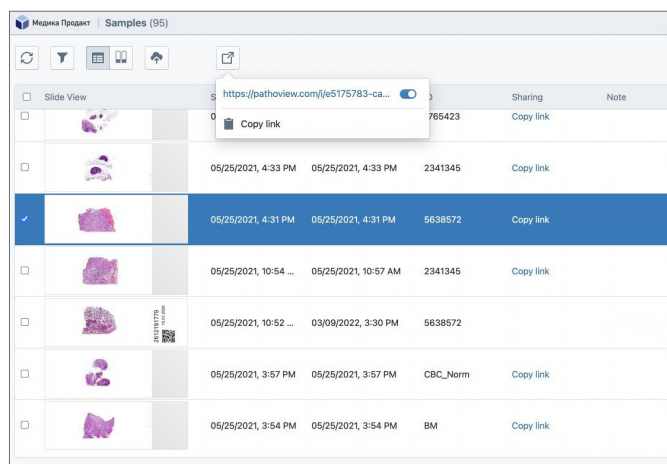


Создание ссылки для отправки коллегам на консультацию

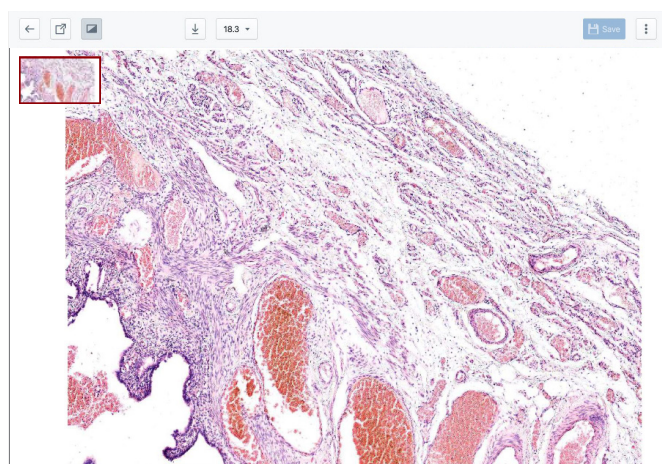


Просмотр цифрового препарата на малом/большом увеличении

Интеграция Vision и Pathoview


В настройках Vision добавляем учетную запись Pathoview. Активируется функция выгрузки препарата в один клик в облачный сервис для консультации с коллегами

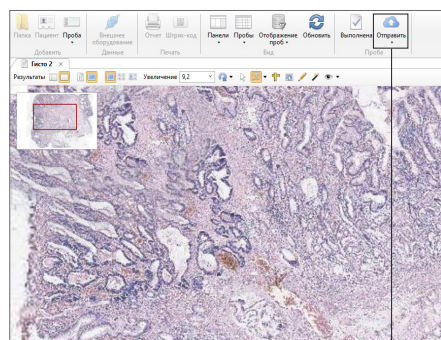

Выберите пробу и нажмите кнопку «Отправить» на панели инструментов

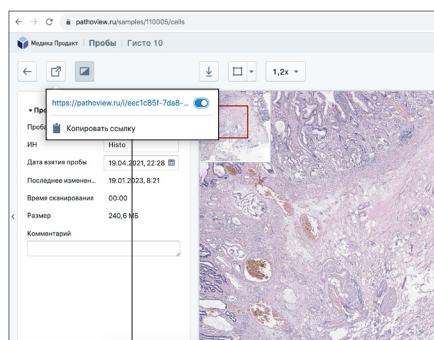

Скопируйте ссылку и отправьте на консультацию коллегам

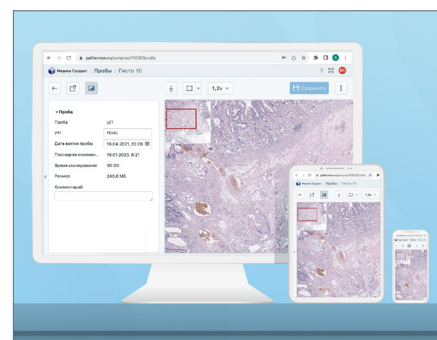

Ваш коллега просматривает цифровой препарат на любом устройстве

Спецификации

	Основные характеристики
Аппликационный модуль	Vision Slide
Модуль для просмотра и обмена цифровыми препаратами	Pathoview
Сканирование	Автоматическое
	Компоненты системы
Состав	Сканирующий блок Рабочая станция Монитор Внешний считыватель штрих-кода Встроенный считыватель маркировки (опция)
	Технические характеристики
Объектив	20x/0,75
Количество слайдов	1
Поддержка штрих-кода	1D, 2D
Метод исследования	Светлое поле
Микроскопический слайд	Стандартный 75x25 мм, толщина 1,1 мм
Коммуникации	Двухнаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7
База данных	Объединение нескольких систем в одну БД; архивирование через экспорт на внешние носители
Питание	110–240 В/50–60 Гц
Рабочая температура	15–30 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	20–80 %

www.wm-vision.ru	Автоматические системы для анализа микроскопии
www.vision-suite.ru	Облачное приложение для работы с результатами сканирования слайдов
www.vision-expertise.ru	Онлайн-сервис для профессионалов и экспертов
www.pathoview.ru	Личное облачное хранилище цифровых препаратов



Сделано в России

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



**Медика
Продукт**

ООО «Медика Продукт»
Москва, ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, 129075
Тел.: +7 (495) 787-44-01, горячая линия: +7 (800) 100-14-20

vision@medicaproduct.ru
www.VisionA1.ru